

Nationalt PrøveNummer service

MANUAL for Laboratorier

Formål

Formålet er at indføre et fælles Nationalt laboratoriePrøve Nummersystem, NPN, så alle laboratorieprøver får et unikt nummer.

Omnummerering og mulige forbytninger minimeres hermed.

For at få tildelt en nummerserie og for at oprette de forskellige laboratorier skal man logge på NPN serveren som ligger på sundhedsdatanettet på følgende link enten via hjemmeside: <http://195.80.250.132/webadmin/> eller via webservice: <http://195.80.250.132/web/service/Service>

Til afprøvning af nummerservicen er der også en testside, som man kan logge på: <http://sundcom.health-telematics.dk:8080/webadmin/>

Startside

Man kommer så ind på startside Prøvenummersøgning, hvor man kan søge på et prøvenummer og ved søgning af et prøvenummer, kan der evt. tilvælges modulus 11 tjek af prøvenummeret.

For at logge ind på siden hvor man kan rekvirere og frigive nummerserier, tryk på linket "log på" øverst til højre.



The screenshot shows a web browser window titled "Prøvenummer søgning". The address bar contains the URL "http://sundcom.health-telematics.dk:8080/webadmin/". The page header features the text "nationalt laboratorie prøvenummer" in a blue bar, with "søgning" and "log på" links to the right. Below the header, the main heading "Prøvenummer søgning" is displayed. The search form includes a "Prøvenummer:" label followed by four input boxes containing the digits "100", "000", "000", and "000". Below this is a "Check modulus:" label with an unchecked checkbox. At the bottom of the form is a "Nummersøgning" button.

Log på

For at logge på skal man have en konto. Brugernavn og tilhørende kodeord får man fra sin systemleverandør og det indtastes i de pågældende felter, og der trykkes på "Log ind" knappen. Resten af dette dokument beskriver forløbet for en laboratorie-konto.



The screenshot shows a web browser window with the address bar containing "http://sundcom.health-telematics.dk:8080/webadmin/login". The page title is "Log på National Laboratorie Prøvenummer". The header features the text "nationalt laboratorie prøvenummer" and navigation links for "søgning" and "log på". The main heading is "Log på National Laboratorie Prøvenummer". Below the heading are two input fields: "Brugernavn:" and "Kodeord:". A "Log ind" button is positioned below the "Kodeord:" field.

Nummer Services

Efter succesfuld log på, vises der to nummerservices til venstre.


Den øverste:

"Rekvirer nummerserie", giver mulighed for at bestille en nummerserie.

Den nederste:

"Frigiv nummerserie", er til for at kunne frigive numre man har rekvireret, men ikke brugt. Deres specifikke brug er beskrevet herunder.

Til højre ses de informationer der er registreret på dette laboratorium, for at se alle detaljer trykkes "Vis".

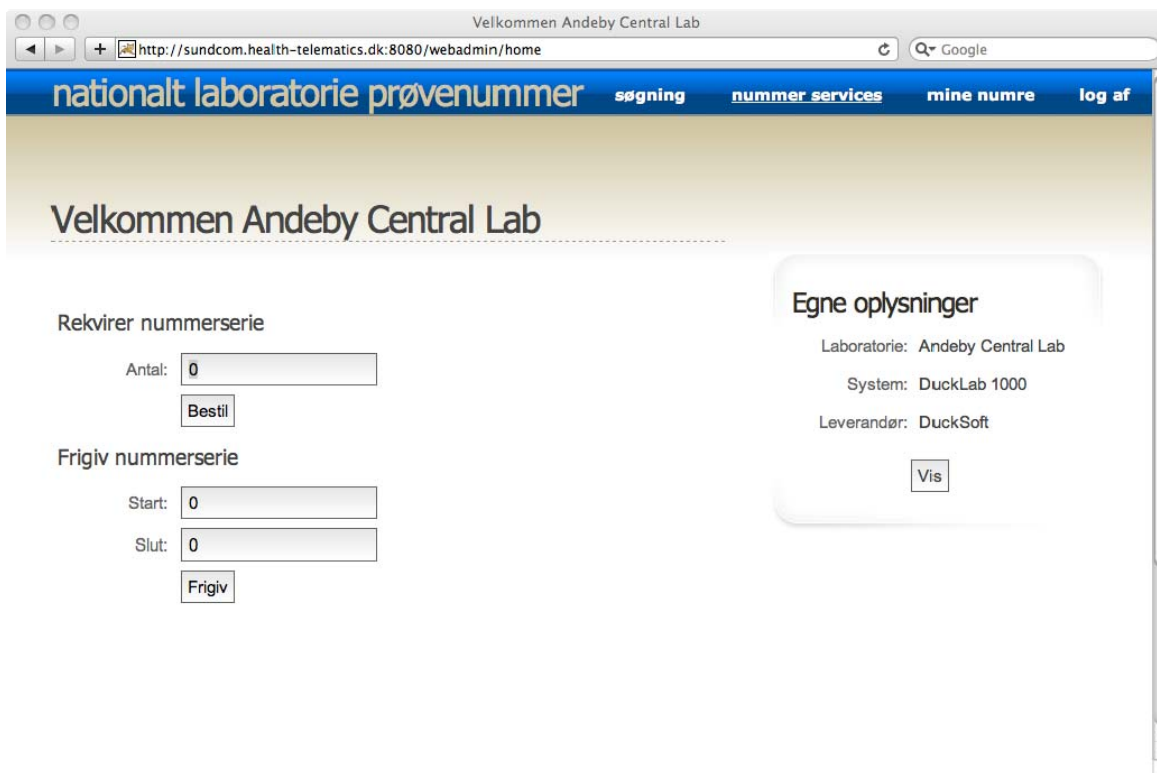

The screenshot shows a web browser window with the address bar containing "http://sundcom.health-telematics.dk:8080/webadmin/home". The page title is "Velkommen Andeby Central Lab". The header features the text "nationalt laboratorie prøvenummer" and navigation links for "søgning", "nummer services", "mine numre", and "log af". The main heading is "Velkommen Andeby Central Lab". Below the heading are two sections: "Rekvirer nummerserie" and "Frigiv nummerserie". The "Rekvirer nummerserie" section has an "Antal:" input field with the value "0" and a "Bestil" button. The "Frigiv nummerserie" section has "Start:" and "Slut:" input fields, both with the value "0", and a "Frigiv" button. To the right is a box titled "Egne oplysninger" containing the following information: "Laboratorie: Andeby Central Lab", "System: DuckLab 1000", and "Leverandør: DuckSoft". A "Vis" button is located below this information.

Rekvirer nummerserie:

I feltet Antal indtastes det ønskede antal numre, i dette eksempel indtastes der 10. Efter endt indtastning trykkes der "Bestil". Ved succesfuld bestilling vises nummerseriens start og slut værdier, disse værdier er inkl.

The screenshot shows a web browser window with the URL `http://sundcom.health-telematics.dk:8080/webadmin/home`. The page title is "Velkommen Andeby Central Lab". The navigation bar includes "nationalt laboratorie prøvenummer", "søgning", "nummer services", "mine numre", and "log af".

The main content area is titled "Velkommen Andeby Central Lab". Below this, there are two main sections:

- Rekvirer nummerserie:** This section contains a form with a label "Antal:" and a text input field containing the number "0". Below the input field is a "Bestil" button. Below the form is a blue-bordered box titled "Alokeret nummerserie" containing the text "Start: 100000100546 slut: 100000100555" and "Start og slut er inklusiv."
- Egne oplysninger:** This section is a rounded box containing the following information: "Laboratorie: Andeby Central Lab", "System: DuckLab 1000", and "Leverandør: DuckSoft". Below this information is a "Vis" button.
- Frigiv nummerserie:** This section contains a form with labels "Start:" and "Slut:" and two text input fields, both containing the number "0". Below the input fields is a "Frigiv" button.

Frigiv nummerserie:

Hvis man har overskydende numre, er der mulighed for at frigive dem til anden brug i denne indtastningsform. I "Start" angives det laveste nummer på den serie af numre man vil frigive. I "Slut" angives det højeste nummer af serien.

Ved tryk på "Frigiv", gives numrene fri, såfremt at nummerserien kun indeholder egne numre.

Hvis frigivelsen gik godt, præsenteres antallet af frigivne numre.

The screenshot shows a web browser window with the URL `http://sundcom.health-telematics.dk:8080/webadmin/home`. The page title is "Velkommen Andeby Central Lab". The navigation bar includes "nationalt laboratorie prøvenummer", "søgning", "nummer services", "mine numre", and "log af".

The main content area is titled "Velkommen Andeby Central Lab". It features two main sections:

- Rekvirer nummerserie:** Includes a text input field for "Antal" with the value "0" and a "Bestil" button.
- Frigiv nummerserie:** Includes text input fields for "Start" and "Slut", both with the value "0", and a "Frigiv" button.

Below the "Frigiv nummerserie" section, a blue button labeled "Frigav nummerserie" is highlighted. Below it, a box displays the message "Frigav 10 numre."


On the right side, there is a box titled "Egne oplysninger" containing the following information:

- Laboratorie: Andeby Central Lab
- System: DuckLab 1000
- Leverandør: DuckSoft

A "Vis" button is located below this information box.

Mine Numre


Under menu punktet, Mine numre, øverst til venstre, kan man se en liste over nummerserier tilhørende dette laboratorium. Hvis man har rekvireret to nummerserier som er på hinanden efterfølgende, smeltes de sammen til en stor serie.



Start	Slut	Oprettet	Ændret
100000000000	100000000001	2010-03-23 16:09:28.273	2010-03-25 11:50:30.631
100000000004	100000000009	2010-03-25 11:50:30.618	2010-03-25 11:50:30.618
100000000030	100000000099	2010-03-23 16:10:23.326	2010-03-26 13:30:22.16
100000000103	100000100540	2010-03-26 13:30:22.158	2010-03-26 13:30:22.158

Laboratorie Information

Fremkommer ved tryk på "Vis" under Egne oplysninger på siden nummer services. Her ses flere detaljer om laboratoriet og systemleverandøren. Ved tryk på "Ændre" under laboratorie informationer kan man ændre egne oplysninger.

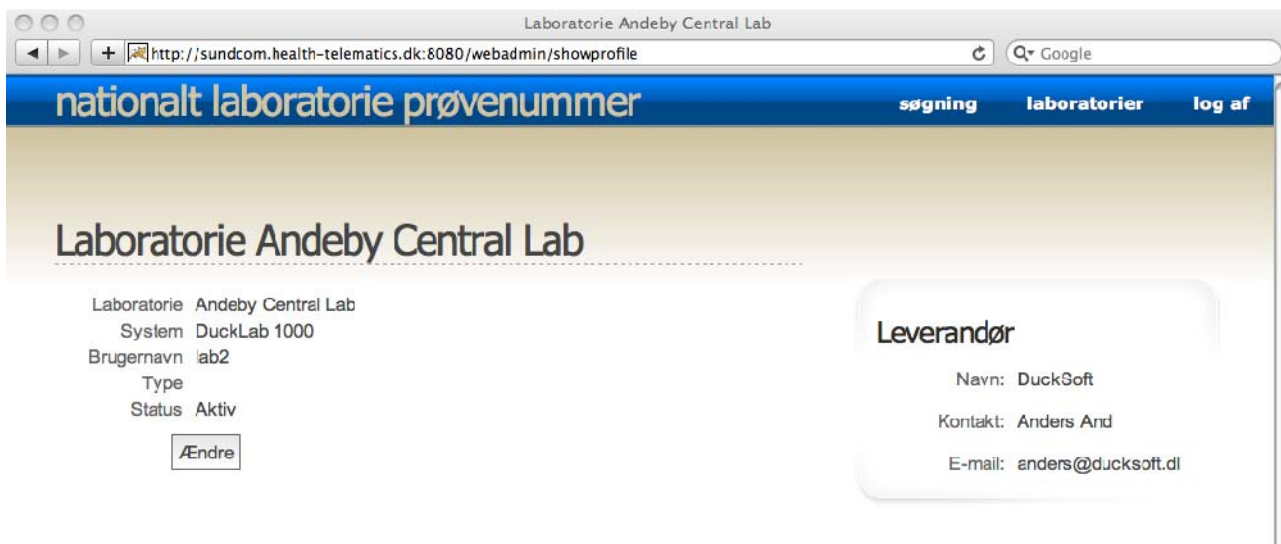

Laboratorie	Andeby Central Lab
System	DuckLab 1000
Brugernavn	lab2
Type	
Status	Aktiv
<input type="button" value="Ændre"/>	

Leverandør

Navn: DuckSoft
Kontakt: Anders And
E-mail: anders@ducksoft.dl

Opret / Ændre Laboratorium

Fremkommer ved tryk på "Ændre" på Laboratorie Informationssiden.

Der mulighed for at sætte / ændre følgende værdier:

Laboratorie: Navn på det pågældende laboratorium

System: Navn på det system laboratoriet har.

Kodeord: Kodeord laboratoriet skal bruge sammen med angivet brugernavn.

Aktiv: Mulighed for at deaktivere kontoen.

En ikke aktiv konto kan ikke længere rekvirere nye nummerserier.

Ændringerne kan enten gemmes, eller fortrydes, ved fortrydelse oprettes / ændres kontoen ikke.

Profil for Administrator

Laboratorie

System

Brugernavn

Kodeord

Aktiv

Leverandør

Navn: DuckSoft

Kontakt: Anders And

E-mail: anders@ducksoft.dk