



# Se vedhæftede filer i labkort.

Udrulning af XMO 8.44 sker i løbet af Maj måned 2018.

Med XMO version 8.44 er det muligt, at se/åbne vedhæftede filer i labkortet.

Gå til patientens labkort. Er der vedhæftede filer vises det med et ikon af et brev.

Prøvenavn	08-02-2018	05-12-2017	27-11-2017
Cervixcytologi	CYTO		
Højde		1.68	
Vægt		62.0	
BMI		22.0	
Taljeomkreds; Pt		1.15	
Hofteomkreds;Pt		0.89	
<a href="#">Væske+vandskema;Pt(barn)</a>			<b>unormal</b>

Åben svaret med dobbeltklik eller Enter.

Ret/se resultat

Slet prøve (F2) Se tekst (F3) Åben Medbin (F5) Dags dato (F6) Gem og forsæt (F7) Hent prøve (F9) Flere Funktioner (Alt+F1) ▾

27-11-2017

H Kode:  Navn: Væske+vandskema;Pt(barn) Enhed:  Egen kode: MCS88115

Resultat: **unormal**

Ref. Min:  Ref. Max:  Ref. yurd.: <Ingen> Vej. beh. mål:  Sentinel beh. mål kode:

Dato: 27-11-2017 Tjd: 00:00 Svartype: Klinisk kemi Aft. beh. mål:

Producentkode / Producent: POT / Patientmålt Laboratorievejledning: National labveil. Rekv. nr.: 101368324584

Arial 16

Besked til Læge:  
sengen var våd torsdag nat

Væskeindtagelse (Gnst)	I hele perioden
Volumen pr. døgn 615 ml (Gnst)	630ml + 600ml
- heraf klokken 19-sengetid 135 ml (Gnst)	150ml + 120ml
Vandladning (Gnst)	I hele perioden Normal
Volumen pr. dag 575 ml (Gnst)	670ml + 480 ml
Vandladningsfrekvens i dagtid 4 gange	5+4 gange 3-7
Utæthed i dagtid	2 af 9 gange Ingen
Udtalt tissetrang	2 af 9 gange Nej
Volumen pr. nat 166 ml (Gnst)	130 ml til 200 ml
Utæthed om natten	3 af 7 nætter Ingen
Funktionelle blærekapacitet 1)	230 ml 2100 ml
2)	

Der er referencer til eksterne filer (Medbin)  Gem  Luk

Der vil nederst stå "Der er referencer til eksterne filer (Medbin)".

Disse åbnes med F5 Åben Medbin.

Medbin  
Slet element (F2) Indsæt nyt element (F5) Gem i journal (F6) Gem på disk (F7) Til afsendelse (F8) Til godkendelse (F9) Åbn via Windows (F10) Flere Funktioner (Alt-F1)

Titel: PDF  
Beskrivelse: PDF fil (væsker grafik, 1 side, PDF)  
Objektreference: d6c7b38d3a6f453aa38f544ca34697e7  
Størrelse (KB): 64 KB

Tilbage Frem Udskriv (F10) Gem på disk

## Væske- og vandladnings Skema for børn

2512489996 - NANCY ANN TEST BERGGREN

Samtykke til videregivelse af svar: **JA**  
Sendt til behandler: 20-02-2018 13:39

### OPSUMMERING

Analyse navn	Værdi	Analysekode
Væske+ vandskema;Pt(barn)	<b>unormal</b>	MCS88115

Side 1 af 2

PDF

Der findes edfacter som henviser til denne Medbin Luk

Dokumentet kan her gemmes på disk eller udskrives hvis det ønskes.


Tilbage Frem Udskriv (F10) Gem på disk

Knapperne Tilbage og Frem bruges til at skifte mellem siderne, hvis der er mere end én side i det vedhæftede dokument.

Side 1 af 2

Ønsker man at gemme filen i patient journalen og have mulighed for at sende filen videre med eks vis en henvisning, er det også en mulighed.

Ved at åbne labsvaret med vedhæftningen og trykke Åben Medbin, hvorefter man får mulighed for at gemme filen i journalen med knappen F6 Gem i journal.

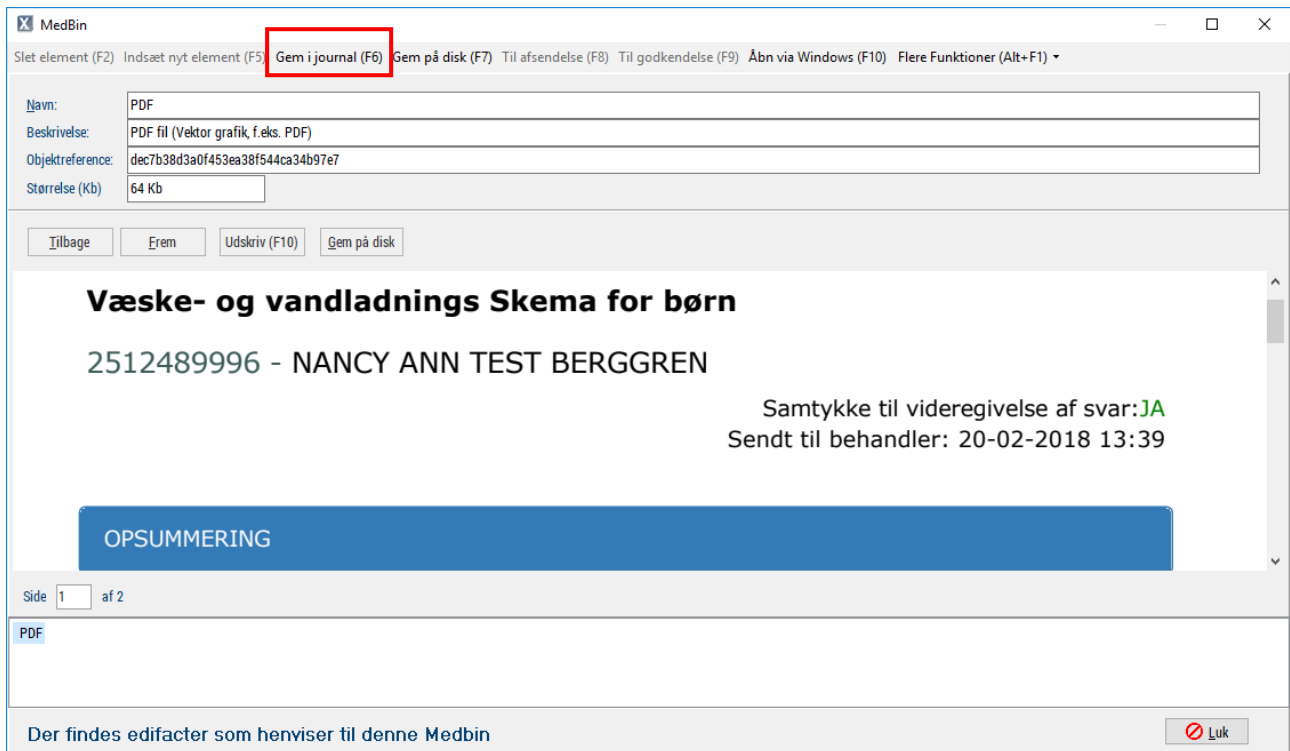

Filen kan nu vedhæftes som en Medbin på henvisninger som tidligere.

**OBS! Man bør notere sig hvad filnavnet/objektreferancen er, da afsender ikke altid navngiver filerne så de er let genkendelige.** (De fire første eller de fire sidste karaktere bør være nok til at kunne genkende filen).

Objektreference: